

SWASH[®] BATHING GLOVES – AVEC PARFUM - ORANGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	Bo4070-8
Basic UDI-DI	871712793BODY.WASHM6
UDI-DI	08717127937189
Usage prévu	Destiné à un lavage corporel complet des patients incontinents et / ou alités comme mesure de prévention des infections.
Contenu du paquet	8 gants de toilette humides
Contenu du carton	40 paquets
Fabricant	Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Date d'émission	01/2021
Date de révision	03/2023
Version	V3

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	Dispositif médical de classe 1 (2017/745/CE)
Composition du tissu	Polyester & Lyocell
Méthode de production du tissu	Spunlace
Poids de norme du tissu	ca. 82 GSM
Poids du carton	ca. 6.375 gram
Poids net du tissu	ca. 50 gram
Poids net du film protecteur	ca. 5 gram
Valeur du pH	5 – 6
Dimensions du gant	22 cm x 15 cm
Dimension du paquet	11 cm x 21,5 cm

INGRÉDIENTS DU LOTION


FONCTION

(%)

Aqua	Agit comme solvant où tous les ingrédients sont dilués.	75-100
Propylene Glycol	Ingrédient hydratant, qui réduit l'assèchement de la peau. Agit aussi comme solvant et détermine la viscosité.	1-5
Glycerin	Crème hydratante, pour prévenir la déshydratation de la peau. Egalement un solvant qui est beaucoup utilisé dans les produits cosmétiques comme les shampoings.	1-5
Caprylyl Glycol	Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Polysorbate 20	Émulsifiant. Lie la lotion et stabilise l'émulsion.	0,1-1
Disodium Cocoamphodiacetate	Ce composant doux nettoyant avec des propriétés protectrices de la peau assure que la saleté se mélange avec de l'eau que la saleté puisse être rincé. Aide à la	0,1-1

	formation de mousse.	
Tocopherol (Vitamin E)	Antioxydant et hydratant pour prévenir le dessèchement de la peau.	0,1-1
Glyceryl Caprylate	Composant hydratant. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Potassium Sorbate	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de vie du produit.	0,1-1
Dipropylene Glycol	Solvant pour la conservation.	0,1-1
Parfum	Un mélange d'ingrédients de parfum	
Sodium Chloride	Additif.	<0,1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

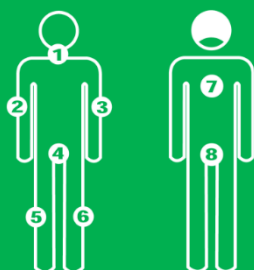

Utilisez un gant pour chaque partie du corps, comme indiqué ci-dessous :

1. Visage, cou et poitrine
2. Bras droit et aisselle
3. Bras gauche et aisselle
4. La zone génitale
5. Jambe droite avec pied
6. Jambe gauche avec pied
7. Dos
8. Fesses et coccyx

Si vous le souhaitez le paquet peut être réchauffé au micro-ondes.

Vérifiez la température avant utilisation.

Les gants de toilette sont jetables et chaque paquet doit être lié à un seul patient.

Si nécessaire, essuyez les plis de la peau en les tamponnant avec un kleenex pour éviter les lésions cutanées liées à l'humidité.

Uniquement pour usage externe.

Nous conseillons d'utiliser un paquet ouvert dans les 48 heures après ouverture.

Ne pas jeter dans les toilettes.

RÉSULTATS DES TESTS

Test d'irritation oculaire

Les résultats montrent que la lotion de Swash[®] Bathing Gloves ne cause pas d'irritation à la cornée ni à l'iris. De plus, aucune rougeur ou gonflement de la muqueuse n'a été observé.

Test d'irritation cutanée

Les résultats montrent que la lotion de Swash[®] Bathing Gloves ne cause pas d'irritation cutanée. Il n'y avait aucun signe d'œdème ou de rougeur de la peau pendant ou après le test.