

SWASH[®] BATHING GLOVES – PARFÜMFREI - WHITE

ALLGEMEINE INFORMATION

Artikelnummer	A04070-8
Basic UDI-DI	871712793BODY.WASHM6
UDI-DI	08717127936847
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Für die Ganzkörperwäsche inkontinenter und/oder bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.
Paketinhalt	8 Waschhandschuhe
Kartoninhalt	40 Packungen
Hersteller	Arion Manufacturing B.V. – Niederlande Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Ausstellungsdatum	04/2021
Überarbeitungsdatum	11.2024
Version	V3


PRODUKTINFORMATION

Produktart	Medizinprodukt Klasse 1 (Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745)
Zusammensetzung des Tuches	Polyester & Lyocell
Stoff-Art	Spunlace
Dicke des Tuches	ca. 82 g/m ²
Gewicht Karton	ca. 6.375 g
Netto Abfallgewicht Tuch	ca. 50 g
Netto Abfallgewicht Folie	ca. 5 g
pH-Wert	5 – 6
Größe Waschhandschuhe	15 cm x 22 cm
Dimensionen Paket	11 cm x 21,5 cm

INHALTSSTOFFE LOTION	FUNKTION	KONZENTRATION %
Aqua	Dient als Lösungsmittel, in dem die übrigen Inhaltsstoffe gelöst werden.	75-100
Propylene Glycol	Ein hydrophiler Stoff, der das Austrocknen der Haut reduziert. Dient ebenfalls als Lösungsmittel und begrenzt die Viskosität.	1-5
Glycerin	Ein hydrophiler Stoff, der das Austrocknen der Haut reduziert.	1-5
Caprylyl Glycol	Ein Hautpflegender Bestandteil. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0,1-1
Polysorbate 20	Ein Emulgator, der dafür sorgt, dass nicht mischbare Stoffe ein homogenes, stabiles Gemisch bilden.	0,1-1
Disodium Cocoamphodiacetate	Dieser milde, reinigende Bestandteil mit hautpflegenden Eigenschaften bewirkt die	0,1-1

	Vermischung des Schmutzes mit Wasser. Sorgt für Schaumbildung.	
Tocopherol (Vitamin E)	Verlängert die Haltbarkeit des Produkts, indem es die Oxidation an der Luft verhindert. Außerdem wird dieser Stoff als Feuchtigkeitsmittel eingesetzt, um Trockenheit von Haut und Haaren zu vermeiden.	0,1-1
Glyceryl Caprylate	Dient zum Befeuchten der Haut. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0,1-1
Potassium Sorbate	Natürliches Konservierungsmittel.	0,1-1
Dipropylene Glycol	Lösungsmittel für das Konservierungssystem.	0,1-1
Sodium Chloride	Zusatzstoff.	<0,1

ANWENDUNG

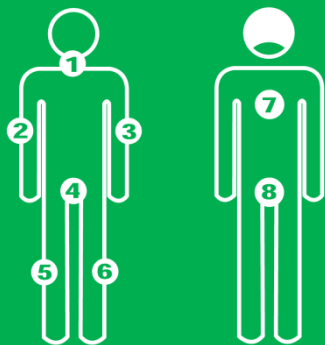

Für jeden Körperbereich einen neuen Waschhandschuh verwenden:

1. Gesicht, Hals und Brust
2. Rechter Arm und Achselhöhle
3. Linker Arm und Achselhöhle
4. Intimbereich
5. Rechtes Bein mit Fuß
6. Linkes Bein mit Fuß
7. Rücken
8. Gesäß

Falls erforderlich, die Swash®-Packung vor Gebrauch erwärmen.

Die Temperatur der erwärmten Waschhandschuhe vor Gebrauch überprüfen.

Einwegprodukt.

Die Packung ist personengebunden.

In tiefen Hautfalten ggf. die Haut mit einem Zellstofftuch trocken tupfen.

Nur zur externen Anwendung geeignet.

Eine geöffnete Packung nur innerhalb 48 Stunden verwendbar.

HAUT – UND AUGENVERTRÄGLICHKEIT

Test auf Augenverträglichkeit

Ergebnisse: - keine Irritationen auf Hornhaut und Iris.
- keine Rötung und Schwellung auf Schleimhaut.

Test auf Hautreizung

Ergebnisse: - keine Irritationen auf der Haut.
- kein Ödem auf der Haut und keine Hautrötung während und nach dem Test.