

SWASH[®] PERINEUM GLOVES – SANS PARFUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	C04070-8
Basic UDI-DI	871712793INCONTINENCENG
UDI-DI	08717127937332
Usage prévu	Destiné aux soins périnéaux des patients incontinents comme mesure de prévention des lésions cutanées associées à une exposition à l'urine ou aux selles (IAD) ou comme mesure de prise en charge de ces lésions cutanées (IAD) à un stade précoce.
Contenu du paquet	8 gants de toilette
Contenu du carton	40 packages
Fabricant	Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas Rutherford 11, 6422 RE Heerlen

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	Dispositif médical de classe 1 (2017/745/CE)
Composition du tissu	Polyester & Lyocell
Méthode de production	Spunlace
Poids de norme du tissu	ca. 82 GSM
Poids du carton	ca. 6971 g
Poids net du tissu	ca. 50 g
Poids net du film protecteur	ca. 5 g
Valeur du PH	5 – 6
Dimension du gant	22 cm x 15 cm
Dimension du paquet	11 cm x 21,5 cm


INGREDIENTS LOTION

FONCTION

		%
Aqua	Sert comme solvant où tout les ingrédients sont dilués.	75-100
Diméthicone	Cet ingrédient qui est aussi souvent utilisé dans les crèmes barrières laisse une couche protectrice sur la peau. De plus une matière hydrophile qui réduit la déshydratation de la peau.	3
Propylene Glycol	Ingrédient hydratant, qui réduit la déshydratation de la peau. Agit aussi comme solvant et détermine la viscosité.	1-5
Laureth-4	Ingrédient de nettoyage doux qui fonctionne comme un agent émulsifiant pour l'huile de diméthicone.	1-5
Glycerin	Crème hydratante, pour prévenir la déshydratation de la peau. Egalement un solvant qui est beaucoup utilisé dans les produits cosmétiques comme les shampoings.	1-5

Caprylyl Glycol	Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Glyceryl Caprylate	Composant hydratant. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Tocopherol (Vitamin E)	Antioxydant et hydratant pour prévenir la déshydratation de la peau.	0,1-1
Disodium Cocoamphodiacetate	Ce composant doux nettoyant avec des propriétés protectrices de la peau assure que la saleté se mélange avec de l'eau que la saleté puisse être rincée. Aide à la formation de mousse.	0,1-1
Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate	Épaississant et modificateur sensoriel	0.1-1
Potassium Sorbate	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de conservation du produit.	0,1-1
Citric Acid	Modificateur de pH	0.1-1
Dipropylene Glycol	Solvant pour la conservation.	0,1-1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

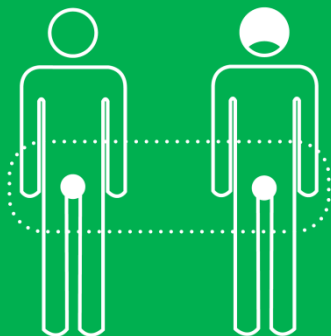

Nettoyez la zone souillée du périnée avec suffisamment de gants de toilettes et d'avant vers l'arrière.

Assurez-vous que la peau soit sèche avant que le matériel d'incontinence et/ou sous-vêtements soit à nouveau placés.

Si vous le souhaitez le paquet peut être réchauffé au micro-ondes.

Vérifiez la température avant utilisation.

Chaque paquet est utilisé que pour un seul personne.

Evitez tout contact avec les yeux.

Dans le cas de rougeurs persistantes et lésions sévères chez le patient (pas de peau irritée mais bien une peau abîmée), c'est nécessaire de consulter un spécialiste soins de plaies, dermatologue, infirmière en dermatologie, médecin de famille ou gériatre.

Les gants de toilette sont jetables et chaque paquet doit être lié à un seul patient.

Uniquement pour usage externe.

Nous conseillons d'utiliser un paquet ouvert dans les 48 heures après ouverture.

Ne pas jeter dans les toilettes.

RÉSULTATS DES TESTS

Tests Irritation de la peau

Les résultats montrent que la lotion de Swash[®] Perineum Gloves ne provoque aucune irritation de la peau. Il n'y a eu par ailleurs aucun signe d'œdème ou de rougeur de la peau pendant ou après le test.

Dermatest

Les produits ont été testés pour leur tolérance cutanée lors de tests épicutanés sous la supervision de dermatologues et conformément aux directives internationales. Aucune réaction cutanée pertinente n'a été constatée dans la zone testée après une seule application du produit.

Le produit a donc été « excellentement » toléré et peut être déclaré « testé dermatologiquement ».